

Date d'édition : 20.01.2026



**Ref : EWTGUWP400**

**WP 400 Essai de résilience 25Nm, Mouton Pendule de Charpy (Réf. 020.40000)**

**Eprouvettes avec des sections et matériaux différents**

Dans le contrôle qualité industriel, lessai de résilience est un essai très répandu.

Il permet de déterminer rapidement et simplement des valeurs caractéristiques pour l'évaluation de matériaux ou de composants.

L'appareil d'essai WP 400 est un mouton pendule solide suivant la DIN EN ISO 148-1, qui a été conçu pour la réalisation d'essais de résilience Charpy.

Grâce à la clarté du montage et à la facilité d'utilisation, on peut observer tous les détails et les phases de l'essai.

Lors de l'essai, un mouton fixé à un bras de pendule décrit, une fois déclenché, un arc de cercle.

Au point le plus bas de la trajectoire du mouton, ce dernier transmet une partie de son énergie cinétique à l'éprouvette entaillée.

Lors de l'impact, l'éprouvette est soit détruite, soit déformée par le choc et entraînée entre les appuis.

L'énergie de choc nécessaire à la déformation de l'éprouvette est lue directement sur une échelle de grande taille.

Avec le système d'acquisition de données WP 400.20, il est possible de transmettre les valeurs de mesure sur un PC où elles pourront être évaluées à l'aide du logiciel.

Afin de varier l'énergie de départ, on peut modifier la masse du mouton, en ajoutant ou retirant des poids.

Un frein réduit l'énergie résiduelle du mouton à chaque oscillation par le point zéro.

Un anneau de protection assure une réalisation des essais en toute sécurité; il sert également à fixer le mouton.

Pour une utilisation sécurisée, le mouton s'active avec deux mains.

Un revêtement de protection de la zone de travail WP 400.50 est disponible en tant qu'accessoire.

Les résultats des essais assurent le contrôle qualité et l'évaluation du comportement de rupture de différents matériaux métalliques.

Des éprouvettes non métalliques peuvent également être utilisées.

Des éprouvettes de géométries dentailles, dimensions et matériaux différents, sont comprises dans la liste de livraison.

#### Contenu didactique / Essais

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température
- influence de la forme de l'entaille, du matériau et de la température de l'éprouvette sur l'énergie de choc

#### Les grandes lignes

- essai de résilience Charpy
- méthode classique de lessai destructif des matériaux pour le contrôle qualité et l'évaluation du comportement

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)

Date d'édition : 20.01.2026

de rupture des matériaux métalliques

- mouton pendule suivant la DIN EN ISO 148-1

Les caractéristiques techniques

Mouton pendule

- capacité de travail
  - 15Nm
  - 25Nm (avec poids supplémentaires)
- mouton
  - poids: 2,05kg et 3,42kg (avec poids supplémentaires)
  - poids supplémentaires: 4x 0,342kg
  - vitesse d'impact: 3,8m/s
  - hauteur de chute: 745mm

Appuis pour éprouvettes

- distance: 40mm

Éprouvettes de choc

- Lxl: 10x5mm, 10x10mm
- section au fond de lentaille: 10x8 et 10x5mm

Matériaux des éprouvettes

- acier de décolletage 9SMn28K
- acier de traitement C45k
- acier de construction S235JRC+C
- laiton CuZn40Pb2

Dimensions et poids

Lxlxh: 1000x300x1000mm

Poids: env. 55kg

Liste de livraison

- 1 appareil d'essai
- 1 jeu de poids supplémentaires
- 1 jeu d'éprouvettes de choc (90 unités)
- 1 documentation didactique




Accessoires disponibles et options

- WP400.01 - 10 échantillons ISO-V en acier de construction, 5mm
- WP400.02 - 10 échantillons ISO-V en laiton, 5mm
- WP400.03 - 10 échantillons ISO-V en laiton, 10mm
- WP400.04 - 10 échantillons ISO-U en acier de décolletage, 5mm
- WP400.05 - 10 échantillons GUNT-R7 en acier de décolletage, 5mm
- WP400.06 - 10 échantillons GUNT-R5 en acier de

## Catégories / Arborescence

Techniques > Mécanique > Propriétés des matériaux > Essai de résilience

Date d'édition : 20.01.2026

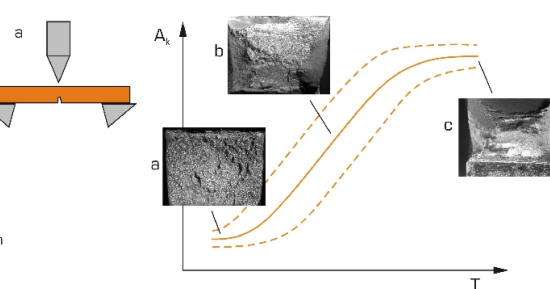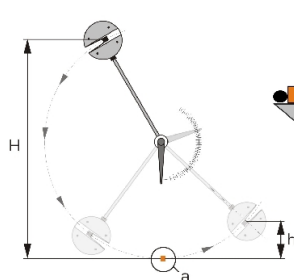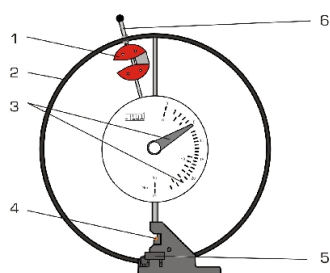


## Options

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.01**

**WP 400.01 10 échantillons ISO-V en acier de construction, 5mm (Réf. 020.40001)**

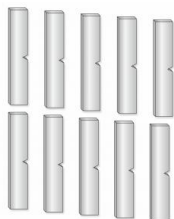

Ce jeu déprovettes en V ISO est disponible en accessoire pour l'appareil dessin WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis.

La résistance déprovette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés d'un matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en V ISO en acier de construction (S235JRC+C).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en V ISO comme accessoires pour l'appareil dessin WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: V ISO
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rayon de résilience: 0,25mm
- matériaux: acier de construction

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu déprovettes (10 pièces)


Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.02**

**WP 400.02 10 échantillons ISO-V en laiton, 5mm (Réf. 020.40002)**

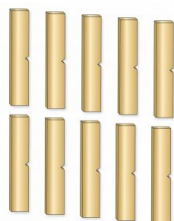

Ce jeu d'éprouvettes en V ISO est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis.

La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés d'un matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en V ISO en laiton (CuZn).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en V ISO comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: V ISO
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rayon de résilience: 0,25mm
- matériaux: laiton

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)


Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.03**

**WP 400.03 10 échantillons ISO-V en laiton, 10mm (Réf. 020.40003)**

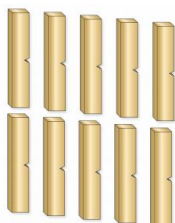

Ce jeu d'éprouvettes en V ISO est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis.

La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés d'un matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en V ISO en laiton (CuZn).

Contenu didactique / Essais

avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en V ISO comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: V ISO
- Lxlxh: 55x10x10mm
- rayon de résilience: 0,25mm
- matériaux: laiton

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)


Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.04**

**WP 400.04 10 échantillons ISO-U en acier de décolletage, 5mm (Réf. 020.40004)**

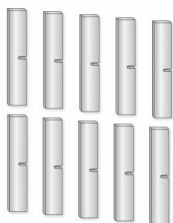

Ce jeu d'éprouvettes en U ISO est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis.

La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés du matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en U ISO en acier de décolletage (9SMn28).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en U ISO comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: U ISO
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rayon de résilience: 1mm
- matériaux: acier de décolletage

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)

Accessoires disponibles et options requis


WP 400 Essai de résilience, 25Nm



Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.05**

**WP 400.05 10 échantillons GUNT-R7 en acier de décolletage, 5mm (Réf. 020.40005)**

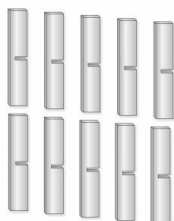

Ce jeu d'éprouvettes en R7 GUNT est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis. La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés du matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en R7 GUNT en acier de décolletage (9SMn28).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en R7 GUNT comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: R7 GUNT
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rainure: 2x7mm
- matériaux: acier de décolletage

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)

Accessoires disponibles et options requis


WP 400 Essai de résilience, 25Nm



Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.06**

**WP 400.06 10 échantillons GUNT-R5 en acier de décolletage, 5mm (Réf. 020.40006)**

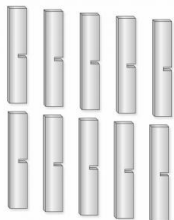

Ce jeu d'éprouvettes en R5 GUNT est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis.

La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés d'un matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai. Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en R5 GUNT en acier de décolletage (9SMn28).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

éprouvettes en R5 GUNT comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: R5 GUNT
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rainure: 2x5mm
- matériaux: acier de décolletage

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)


Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.07**

**WP 400.07 10 échantillons GUNT-R7 en acier de cémentation, 5mm (Réf. 020.40007)**

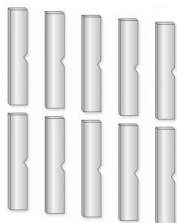

Ce jeu d'éprouvettes en R7 GUNT est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis. La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés du matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai. Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en R7 GUNT en acier de traitement (C45k).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en R7 GUNT comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: R7 GUNT
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rainure: 2x7mm
- matériaux: acier de traitement

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)


Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.08**

**WP 400.08 10 échantillons GUNT-R7 en acier de construction, 5mm (Réf. 020.40008)**

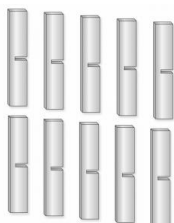

Ce jeu d'éprouvettes en R7 GUNT est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis. La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés du matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en R7 GUNT en acier de construction (S235JRC+C).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

échantillons en R7 GUNT comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: R7 GUNT
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rainure: 2x7mm
- matériaux: acier de construction

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)


Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.09**

**WP 400.09 10 échantillons GUNT-V en acier de construction, 5mm (Réf. 020.40009)**

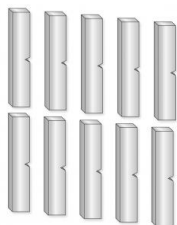

Ce jeu d'éprouvettes en V GUNT est disponible en accessoire pour l'appareil d'essai WP 400.

Lors d'un essai de résilience, une éprouvette entaillée, dont les deux extrémités reposent sur un appui, est détruite ou tordue par l'impact avec le marteau ou passée à travers les appuis.

La résistance d'éprouvette contre cette charge permet de tirer des conclusions sur la résilience du matériau.

Les résultats de l'essai de résilience proposent une valeur indicative des propriétés d'un matériau.

Ils ne peuvent cependant être comparés que lorsqu'ils ont été obtenus sur des éprouvettes à géométrie semblable et dans les mêmes conditions d'essai.

Pour cette raison, seuls les éprouvettes au profil ISO et les éprouvettes entaillées supplémentaires avec un profil rectangulaire (profil GUNT) sont utilisées.

Le jeu comprend dix éprouvettes en V GUNT en acier de construction (S235JRC+C).

Contenu didactique / Essais  
avec WP 400

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température

Les grandes lignes

éprouvettes en V GUNT comme accessoires pour l'appareil d'essai WP 400

Les caractéristiques techniques

10 éprouvettes pour essais de résilience

- forme: V GUNT
- Lxlxh: 55x5x10mm
- rayon de résilience: 0,25mm
- matériaux: acier de construction

Dimensions et poids

Poids: env. 0,5kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 jeu d'éprouvettes (10 pièces)

Accessoires disponibles et options requis

WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.20**

**WP 400.20 Système d'acquisition de données (Réf. 020.40020)**

Avec interface PC USB et logiciel inclus



L'acquisition de données complète le pendule d'impact WP 400.

Il permet de mesurer électroniquement l'énergie de choc lors de l'essai de résilience et de traiter les données sur PC.

Les valeurs mesurées et la courbe d'énergie de choc-température peuvent être déterminées, mises en mémoire et éditées sur une imprimante.

Un rapport de contrôle complet suivant DIN 50115 peut en outre être imprimé.

L'instruction pour expérience est intégrée au programme sous forme de fichier pdf.

L'appareil permet d'utiliser tous les échantillons ISO usuels et peut s'adapter aux dimensions d'échantillons spécifiques.

Le système de mesure se compose d'un codeur angulaire et d'un amplificateur de mesure avec une connexion USB et un écran tactile pour l'énergie de choc.

Contenu didactique / Essais

- réalisation de l'essai de résilience suivant DIN 50115
- enregistrement de la courbe d'énergie de choc-température

Les grandes lignes

- Logiciel d'acquisition et de traitement des données de mesure pour l'essai de résilience WP 400

Les caractéristiques techniques

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 265x260x110mm

Poids: env. 2 kg

Nécessaire au fonctionnement

PC avec Windows recommandé

Liste de livraison

1 CD avec logiciel GUNT + câble USB, 1 codeur angulaire, 1 amplificateur, 1 notice

Date d'édition : 20.01.2026

**Ref : EWTGUWP400.50**

**WP 400.50 Cage de protection pour mouton pendule (Réf. 020.40050)**



Ce revêtement protecteur est un accessoire conçu pour l'appareil d'essai WP 400.

Le marteau oscillant ou une éprouvette de choc présentent un danger potentiel pendant l'essai de résilience.

Le revêtement protecteur est fortement recommandé en tant que dispositif de sécurité pour la réalisation d'essais de résilience.

Le revêtement protecteur est vissé à l'appareil d'essai WP 400 et forme un environnement de travail protégé pour la réalisation d'essais.

Une porte située dans le revêtement protecteur permet d'accéder à la zone de travail.

Deux poignées facilitent le transport de l'appareil d'essai.

Contenu didactique / Essais

Les grandes lignes

dispositif de sécurité pour les essais de résilience sur le WP 400

Les caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Lxlxh: 1100x300x1100mm

Poids: env. 15kg

Nécessaire au fonctionnement

Liste de livraison

1 Cage de protection

Accessoires disponibles et options requis


WP 400 Essai de résilience, 25Nm

Produits alternatifs

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGUWP410

WP 410 Essai de résilience 300Nm, Mouton Pendule de Charpy (Réf. 020.41000)

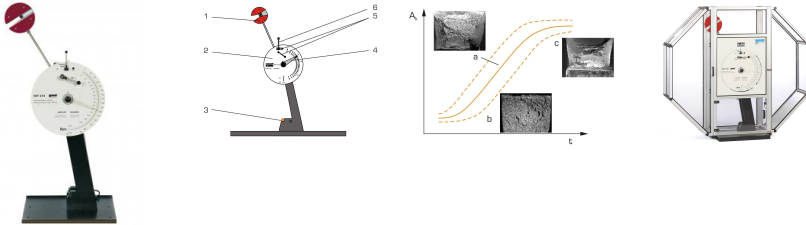

Dans le contrôle qualité industriel, lessai de résilience est un essai très répandu; il permet de déterminer rapidement et simplement des valeurs caractéristiques pour l'évaluation de matériaux ou de composants. Le banc d'essai WP 410 est un mouton pendule solide suivant la DIN EN ISO 148-1, qui a été conçu pour la réalisation d'essais de résilience Charpy.

Grâce à la clarté du montage et à la facilité d'utilisation, on peut observer tous les détails et les phases de l'essai.

L'appareil est suffisamment performant pour permettre de réaliser des essais basés sur les standards industriels.

Lors de l'essai, un mouton fixé à un bras de pendule décrit, une fois déclenché, un arc de cercle.

Au point le plus bas de la trajectoire du mouton, ce dernier transmet une partie de son énergie cinétique à l'éprouvette entaillée.

Lors de l'impact, l'éprouvette est soit détruite, soit déformée par le choc et entraînée entre les appuis.

L'énergie de choc nécessaire à la déformation de l'éprouvette est lue directement sur une échelle de grande taille.

Avec le système d'acquisition de données WP410.20, il est possible de transmettre les valeurs de mesure sur un PC, où elles pourront être évaluées à l'aide du logiciel.

Afin de varier l'énergie de départ, on peut modifier la masse du mouton en ajoutant ou retirant des poids.

Un frein réduit l'énergie résiduelle du mouton.

Un revêtement de protection WP 410.50 de la zone de travail, disponible comme accessoire, permet la réalisation des essais en toute sécurité.

Pour une utilisation sécurisée, le mouton s'active avec deux mains.

Les résultats des essais assurent le contrôle qualité et l'évaluation du comportement de rupture de différents matériaux métalliques.

Des éprouvettes non métalliques peuvent également être utilisées.

Des éprouvettes de choc en V ISO en acier inoxydable sont incluses dans la liste de livraison.

Des éprouvettes composées d'autres matériaux sont disponibles comme accessoires.

#### Contenu didactique / Essais

- détermination de l'énergie de choc
- détermination de la résilience
- évaluation des caractéristiques de la surface de rupture
- enregistrement d'un diagramme énergie de choc-température
- influence de la forme de l'entaille, du matériau et de la température de l'éprouvette sur l'énergie de choc

#### Les grandes lignes

- essai de résilience Charpy avec capacité de travail accrue jusqu'à 300Nm
- mouton pendule basé sur les standards industriels / DIN EN ISO 148-1
- réalisation des essais en toute sécurité grâce à l'activation à deux mains du mouton et à la cage de protection WP 410.50 disponible en option

#### Les caractéristiques techniques

##### Mouton pendule

- capacité de travail
  - 150Nm
  - 300Nm (avec poids supplémentaires)
- mouton

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)





Date d'édition : 20.01.2026

- poids: 9,9kg et 19,8kg (avec poids supplémentaires)
- poids supplémentaires: 4x 2,475kg
- vitesse d'impact: 5,5m/s
- longueur du pendule: 840mm
- angle de chute: 150°

Appuis pour éprouvettes  
- distance: 40mm

Éprouvettes de choc (en V ou en U ISO)  
- Lxl: 10x10mm

Matériau des éprouvettes  
- acier inoxydable 1.4301  
230V, 50Hz, 1 phase  
230V, 60Hz, 1 phase; 120V, 60Hz, 1 phase  
UL/CSA en option

Dimensions et poids  
Lxlxh: 800x600x1460mm  
Poids: env. 360kg

Liste de livraison  
1 banc essai  
1 jeu de poids supplémentaires  
1 jeu d'éprouvettes de choc en V ISO en acier inoxydable (10 unités)  
1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options  
WP410.01 - 10 échantillons ISO-V en acier St37k  
WP410.02 - 10 échantillons ISO-V en cuivre  
WP410.03 - 10 échantillons ISO-V en laiton  
WP410.20 - Système d'acquisition de données  
WP410.50 - Cage de protection pour mouton pendule