

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGUHL105



**HL 105 Panneau d'étude de la vanne à trois voies  
(Réf. 065.10500)**

**Influence du mélange sur température d'entrée circuit de chauffage et température de circulation**

Le banc d'essai a été conçu principalement pour la formation aux techniques de chauffage et sanitaire.  
Une vanne à trois voies assure dans un système de chauffage la régulation de la température de circulation et d'entrée circuit de chauffage.

Une pompe est montée dans le circuit. L'équilibre de pression dans le système est effectuée par le biais d'une soupape de décharge.

Des thermomètres à bilame affichent la température à tous les points importants du circuit de chauffage.

### Contenu didactique / Essais

- fonctionnement d'une vanne à 3 voies
- influence du mélange sur la température d'entrée circuit de chauffage et la température de circulation
- influence de la position de la vanne sur le débit
- D'autres bancs d'essai et systèmes de la série HL 100 permettent de construire un système de chauffage complet.

### Les grandes lignes

- Banc d'essai pour techniques de chauffage et sanitaire
- Fonctionnement d'une vanne à 3 voies
- Construction d'un système de chauffage complet avec d'autres bancs d'essai et systèmes de la série HL 100

### Les caractéristiques techniques

#### Pompe

- puissance absorbée: 70W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

#### Vanne à trois voies

- angle de réglage: 90°C
- durée d'ouverture: 100s

#### Plages de mesure

- débit: 3x 150...1700L/h, 1x 40...400L/h
- température: 0...100°C

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 1650x700x1850mm

Poids: env. 112kg

#### Nécessaire au fonctionnement

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

230V, 50/60Hz, 1 phase

Alimentation en eau chaude: 1800L/h, raccord d'eau froide, évacuation

Liste de livraison

1 banc d'essai

1 mode d'emploi

Accessoires disponibles et options

HL112 - Panneau d'étude radiateurs

HL305 - Équilibrage des installations de chauffage

Produits alternatifs


HL106 - Panneau d'étude vanne à quatre voies

HL108 - Panneau d'étude circuit de chauffage domestique

HL620 - Panneau d'étude régulation chauffage

### Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Systèmes domestiques de chauffage et ventilation > Essais fondamentaux de la technique du chauffage - panneaux d'étude

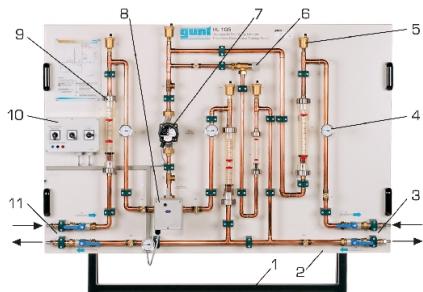

### Options


## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGUHM112

**HM 112 Banc d'essai de mécanique des fluides (Réf. 070.11200)**

Avec interface PC USB et logiciel inclus

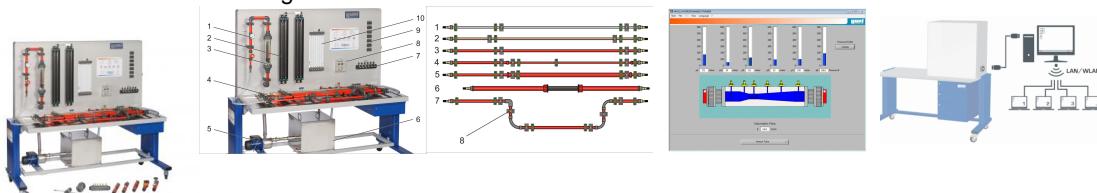

Les connaissances sur l'écoulement dans des systèmes de tuyauterie trouvent des applications dans de nombreux domaines.

Lorsque de l'eau s'écoule au travers d'un système de tuyauterie, des pertes de charge se produisent suite au frottement interne et au frottement du tuyau.

Les pertes de charge dans le fluide et dépendent de manière directe des résistances installées et de la vitesse d'écoulement.

Le banc d'essai HM 112 permet de réaliser une grande diversité d'expériences sur la mesure du débit et de la pression ainsi que sur la détermination des pertes de charge et des évolutions de la pression sur différents éléments de tuyauterie.

L'évaluation des valeurs de mesure se fait à l'aide du logiciel GUNT fourni.

Vous pouvez ainsi facilement enregistrer des caractéristiques et les évaluer directement sur le PC.

Le banc d'essai comprend six sections de tuyau différentes disposées horizontalement.

Ce qui permet d'étudier l'influence sur la perte de charge du matériau, du diamètre ainsi que de la section et des changements de direction du tuyau.

Une seconde section de tuyau permet d'y installer des objets de mesure comme: les soupapes, le collecteur d'impuretés, le tube de Venturi, le tube de Pitot, l'orifice de mesure ou tuyère de mesure.

Les objets de mesure sont transparents de manière à pouvoir visualiser les différentes fonctions.

Un jeu d'objets de mesure supplémentaire (HM 110.01) est disponible, ce qui permet d'étendre les possibilités d'essai.

Le banc d'essai fonctionne indépendamment du réseau d'alimentation en eau et est équipé d'une pompe et d'un réservoir d'eau.

Un rotamètre se trouvant sur le banc d'essai permet de déterminer le débit.

Des points de mesure de la pression se trouvent juste avant et après les objets de mesure, qui ont la forme de chambres annulaires.

Cela permet d'assurer la mesure précise de la pression.

Cinq appareils de mesure de la pression avec affichages analogiques ou numériques sont prévus pour mesurer la pression.

Selon le procédé de mesure, les valeurs de mesure peuvent être lues soit de manière analogique sur le manomètre, soit sur des affichages numériques.

Les valeurs de mesure sont transmises vers un PC afin d'être évaluées à l'aide du logiciel fourni.

La transmission des données au PC se fait par une interface USB.

### Contenu didactique / Essais

- procédés de mesure du débit et de la pression
- fonction de la buse, du diaphragme, du tube de Venturi
- pertes au niveau de coudes de tuyau, angles de tuyau, modifications de section et robinetteries d'arrêt
- détermination des coefficients de frottement d'un tuyau et des coefficients de traînée
- caractéristiques d'ouverture avec des robinetteries d'arrêt

### Les grandes lignes

- nombreuses possibilités d'essais de base de mécanique des fluides
- différentes sections de tuyau avec beaucoup d'éléments de tuyauterie
- logiciel GUNT pour l'acquisition de données

### Les caractéristiques techniques

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

### Pompe

- puissance absorbée: 0,37kW
- débit de refoulement max.: 4,5m<sup>3</sup>/h
- hauteur de refoulement max.: 28,5m

Réservoir de stockage: 55L

Section de tuyau pour objets de mesure interchangeables

- 32x1,8mm, PVC
- 3 sections de tuyau rectilignes, longueur: 1000mm

- ½, acier galvanisé

- 18x1mm, cuivre

- 20x1,5mm, PVC

Section de tuyau, PVC

- rétrécissement continu, Ø: 20x1,5?16x1,2mm

- élargissement continu, Ø: 20x1,5?32x1,8mm

- avec angle de tuyau et coude de tuyau à 90°, Ø: 20x1,5mm

Manomètre à tubes: 2x 2 tubes, 1x 6 tubes

### Plages de mesure

pression différentielle: 1x 0?200mbar

pression:

- 6x 0?390mmCA

- 4x 0?600mmCA

débit: 1x 0,2?2,5m<sup>3</sup>/h

température: 1x 0?60°C

230V, 50Hz, 1 phase

### Dimensions et poids

Lxlxh: 2220x820x1980mm

Poids: env. 250kg

### Necessaire au fonctionnement

PC avec Windows recommandé

### Liste de livraison

1 banc dessai

1 jeu d'objets pour la mesure

1 jeu d'accessoires

1 CD avec logiciel GUNT + câble USB

1 documentation didactique

### Accessoires

en option

pour l'apprentissage à distance

GU 100 Web Access Box

avec

HM 112W Web Access Software

### Autres accessoires

HM 110.01 Jeu d'objets de mesure, laiton

### Produits alternatifs

HM


## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGUHL305

HL 305 Equilibrage installations de chauffage avec 6 radiateurs, 3 tronçons, pompe (Réf. 065.30500)

4x débitmètres à flotteur, vannes thermostatiques

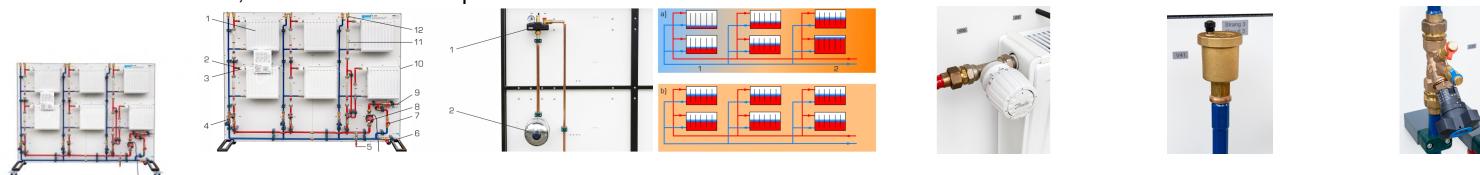

L'équilibrage hydraulique sert à limiter la quantité d'eau circulant dans le radiateur par rapport à celle calculée. Il doit garantir que tous les radiateurs puissent être alimentés en eau chaude en fonction de leur besoin à chaque point de fonctionnement.

L'équilibrage se fait via des raccords de réglage ajustables.

Le banc d'essai contient des composants du commerce.

Il contient trois sous-circuits de chauffage avec radiateurs, vannes thermostatiques et pompe de circulation.

Chaque circuit peut être fermé.

Une fois remplie, il est indépendant du réseau d'eau ou des raccordements d'entrée de circuit de chauffage et de retour de circuit de chauffage.

Il peut cependant également être exploitée avec un circuit de chauffage.

### Contenu didactique / Essais

- résistance variable du réseau de conduites
- vanne d'équilibrage
- vanne thermostatique préajustable
- soupape de décharge à pression différentielle

### Les grandes lignes

- équilibrage d'une installation de chauffage
- alimentation en eau par raccords rapides

### Les caractéristiques techniques

#### Pompe

- puissance absorbée: 60W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

6 vannes d'équilibrage: PN 16

Plages de mesure

- débit: 1x 30...320L/h, 4x 50...640L/h
- température: 1x -50...300°C

230V, 50Hz, 1 phase

### Dimensions et poids

Lxlxh: 2250x750x1790mm

Poids: env. 210kg

### Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 thermomètre
- 1 mode d'emploi

### Produits alternatifs

HL108 - Panneau d'étude circuit de chauffage domestique

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

HL112 - Panneau d'étude radiateurs

HL300 - Installation de chauffage

Ref : EWTGUHL350

**HL 350 Banc d'essai pour brûleur à fioul (Réf. 065.35000)**

Avec mesures de t°, pression et fenêtre pour observation de la flamme



Le banc d'essai est équipé d'un brûleur à fioul.

La pression de fioul au brûleur, la température dans la chambre de combustion mesurée avec un thermocouple et la température de préchauffage du fioul sont affichées sur un instrument de mesure numérique supplémentaire.

Un petit réservoir à fioul est logé dans le bas du bâti.

Comme particularité, la chaudière de chauffage est équipée de une fenêtre d'observation de la flamme.

La chaleur produite peut être évacuée entièrement par un échangeur de chaleur à plaques et des raccords supplémentaires d'eau froide, ce qui autorise un fonctionnement continu du banc d'essai.

Des analyses des gaz brûlés peuvent être effectuées avec l'appareil d'analyse des fumées HL 860.

### Contenu didactique / Essais

- composition et fonctionnement d'un brûleur à fioul
- fonctionnement d'une chaudière de chauffage avec un brûleur à fioul
- influence du réglage du brûleur sur la combustion et la forme de la flamme
- mesures de températures à différents endroits de la chambre de combustion
- mesures de pression du fioul sur le brûleur et observation des effets des modifications sur la flamme
- étude de l'effet du préchauffage du fioul sur la combustion et en particulier sur la flamme
- calcul de la puissance calorifique d'une chaudière de chauffage
- fonctionnement d'un échangeur de chaleur à plaques
- évolution de température dans le temps dans un échangeur de chaleur à plaques

### Les grandes lignes

- Banc d'essai pour brûleur à fioul
- Peut être complété en une installation de chauffage complète
- Chaudière avec fenêtre pour observation de la flamme

### Les caractéristiques techniques

#### Chaudière

- puissance nominale: 17...21kW
- unité de régulation avec limiteur de température

#### Brûleur

- puissance nominale: env. 18kW

#### Pompe

- puissance absorbée: 60W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)



## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

### Échangeur de chaleur à plaques

- capacité: 3kW
- 10 plaques

### Groupe de sécurité de la chaudière suivant DIN 4751

- 2,5bar
- 50kW

Réservoir de fioul: 15L

### Plages de mesure

- pression (d'arrivée fioul): 1...25bar
- température: 1x 0...1200°C / 1x -50...400°C /

1x 0...120°C / 3x 0...80°C

- compteur d'eau: 2,5m³/h

### Dimensions et poids

Lxlxh: 1560x800x2000mm

Poids: env. 269kg

### Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Raccord d'eau, drain

Ventilation et évacuation des gaz déchappement requises

### Liste de livraison

1 banc d'essai

1 mode d'emploi

### Accessoires disponibles et options

HL860 - Appareil d'analyse des fumées

### Produits alternatifs

HL351 - Unité de démonstration d'une chaudière de chauffage

HL352 - Banc d'essai d'une chaudière avec réservoir

HL530 - Panneau de démonstration de fonctionnement d'un appareil à gaz


## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGUHL351

HL 351 Unité de démonstration d'une chaudière de chauffage (Réf. 065.35100)

Avec mesures de température

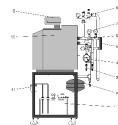

Lorsque l'eau de la chaudière a atteint la température préajustée, différents régimes peuvent être choisis en modifiant la pression du fioul.

Un circuit chauffant fixe, avec un échangeur de chaleur à plaques, simule le circuit de chauffage de l'habitation. Via des raccordements d'eau de refroidissement, la chaleur générée peut être évacuée, permettant un fonctionnement continu.

La quantité de chaleur évacuée peut être calculée.

La paroi arrière de la chaudière comporte des raccords pour un circuit de chauffage externe.

De la sorte, le banc d'essai HL 351 peut être étendu avec d'autres panneaux d'exercice de la série HL pour former une installation de chauffage complète.

### Contenu didactique / Essais

- fonctionnement d'un brûleur à fioul
- fonctionnement d'une chaudière de chauffage avec un brûleur à fioul
- ajustage du brûleur pendant le fonctionnement
- mesures de températures à différents endroits de la chambre de combustion
- calcul de la puissance calorifique d'une chaudière de chauffage
- fonctionnement d'un échangeur de chaleur à plaques
- évolution de température dans le temps dans un échangeur de chaleur à plaques

### Les grandes lignes

- Banc d'essai pour brûleur à fioul
- Réservoir de fioul transparent
- Peut être complétée en une installation de chauffage complète

### Les caractéristiques techniques

#### Chaudière

- puissance nominale: 17...21kW
- unité de régulation avec limiteur de température

#### Brûleur

- puissance nominale: env. 18kW

#### Pompe

- puissance absorbée: 70W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

#### Echangeur de chaleur à plaques

- capacité: 3kW
- 10 plaques

#### Groupe de sécurité de la chaudière suivant DIN 4751

- 2,5bar
- 50kW

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Réservoir de fioul: 15L  
Compteur d'eau: 2,5m<sup>3</sup>/h

Plages de mesure  
- température: 4x 0...120°C

Dimensions et poids  
Lxlxh: 1510x810x1620mm  
Poids: env. 230kg

Nécessaire au fonctionnement  
230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase  
Raccord d'eau, drain  
Ventilation, évacuation des gaz d'échappement requises

Liste de livraison  
1 banc d'essai  
1 mode d'emploi

Accessoires disponibles et options  
HL860 - Appareil d'analyse des fumées


Produits alternatifs  
HL350 - Banc d'essai pour brûleur à fioul  
HL352 - Banc d'essai d'une chaudière avec réservoir  
HL530 - Panneau de démonstration de fonctionnement d'un appareil à gaz

### Produits alternatifs

Ref : EWTGUHL106

#### **HL 106 Panneau d'étude de la vanne à quatre voies (Réf. 065.10600)**

Influence du mélange sur température d'entrée circuit de chauffage et température de circulation

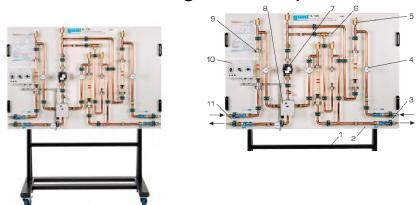

Le banc d'essai a été conçu principalement pour la formation aux techniques de chauffage et sanitaire.  
Une vanne à quatre voies assure dans un système de chauffage en plus de la régulation de température de circulation et d'entrée de circuit de chauffage également la régulation de température de retour de chaudière.  
Des raccords permettent l'alimentation en eau chaude et le branchement de radiateurs.  
L'équilibre de pression dans le système est effectué par le biais d'une soupape de décharge.  
Des thermomètres à bilame affichent les températures aux endroits pertinents.

### Contenu didactique / Essais

- fonctionnement d'une vanne à quatre voies
- influence du mélange sur la température d'entrée de circuit de chauffage et la température de circulation
- influence de la position de la vanne sur le débit
- d'autres bancs d'essai et systèmes de la série HL 100 permettent de construire un système de chauffage complet.

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)



## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

### Les grandes lignes

- banc d'essai pour techniques de chauffage et sanitaire
- fonctionnement d'une vanne à quatre voies
- construction d'un système de chauffage complet avec d'autres bancs d'essai et systèmes de la série HL 100

### Les caractéristiques techniques

#### Pompe

- puissance absorbée: 60W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

#### Vanne à quatre voies

- angle de réglage: 90°C
- durée d'ouverture: 2min

#### Plages de mesure

- débit: 3x 150...1600L/h, 1x 0...440L/h
- température: 0...100°C

230V, 50Hz, 1 phase

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 1660x700x1860mm

Poids: env. 45kg

#### Nécessaire au fonctionnement

raccord deau 1700L/h, drain

#### Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 mode d'emploi

#### Accessoires disponibles et options

HL112 - Panneau d'étude radiateurs

HL305 - Équilibrage des installations de chauffage

#### Produits alternatifs

HL105 - Panneau d'étude vanne à trois voies

HL108 - Panneau d'étude circuit de chauffage domestique

HL620 - Panneau d'étude régulation chauffage

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)


## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Ref : EWTGUHL108

**HL 108 Panneau d'étude circuit de chauffage domestique (Réf. 065.10800)**

avec radiateurs, pompe de circulation et vanne à quatre voies

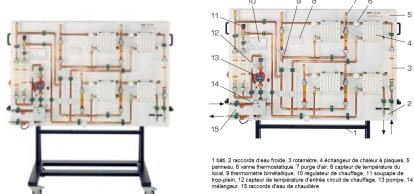

Une pompe de circulation assure la circulation à travers quatre radiateurs dont la température peut être ajustée par des vannes thermostatiques.

Une régulation numérique maintient la température de local constante.

En cas de déviations, elle commande une vanne à quatre voies.

Celle-ci sert à régler la température d'entrée de circuit de chauffage et de retour chaudière.

L'alimentation en eau froide permet de dissiper la chaleur produite. Une soupape de décharge assure la compensation.

Les températures peuvent être lues sur des thermomètres à cadran.

### Contenu didactique / Essais

- faire connaissance avec d'une installation de chauffage central et ses composants
- équilibrage hydraulique
- fonctionnement d'une pompe de circulation
- fonctionnement d'un régulateur de chauffage
- fonctionnement d'une vanne à quatre voies

### Les grandes lignes

- Banc d'essai pour techniques de chauffage et sanitaire
- Fonctionnement d'une installation de chauffage central
- Référence pratique plus importante de par l'utilisation de composants courants

### Les caractéristiques techniques

#### Pompe

- puissance absorbée: 60W
- débit de refoulement max.: 60L/min
- hauteur de refoulement max.: 4m

#### Echangeur de chaleur à 8 plaques

- capacité: 3kW

#### Régulateur de chauffage avec asservissement de la température d'entrée de circuit de chauffage

- entrées: 2 capteurs de température

#### Plages de mesure

- température: 0...100°C
- débit: 2x 150...1600L/h, 1x 0...1000L/h,

4x 0...400L/h

#### Dimensions et poids

Lxlxh: 1850x700x1780mm

poids: env. 100kg

#### Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)

## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Alimentation en eau chaude et froide: 1700L/h

### Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 mode d'emploi

### Produits alternatifs


HL112 - Panneau d'étude radiateurs

HL300 - Installation de chauffage

HL305 - Équilibrage des installations de chauffage

Ref : EWTGUHL620

### HL 620 Panneau d'étude régulation chauffage (Réf. 065.62000)

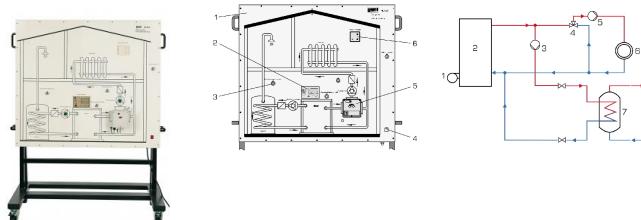

Le banc d'essai montre de manière claire la fonction d'une régulation de chauffage.

Le régulateur électronique, le thermostat du local et le mélangeur sont des éléments réels.

La température de l'eau, la température du local et la température extérieure sont ajustées à l'aide de potentiomètres.

Des lampes de signalisation indiquent le fonctionnement des pompes et de la chaudière.

La disposition claire des éléments sur un schéma de processus facilite la compréhension des relations.

L'introduction manuelle des paramètres via des potentiomètres garantit une réponse rapide du système.

### Contenu didactique / Essais

- commande d'un régulateur de chauffage moderne
- réglage de la température
- comportement de l'installation

### Les grandes lignes

- régulation électronique de chauffage, commandé par les conditions atmosphériques
- réponse rapide du système aux modifications de température

### Les caractéristiques techniques

Servomoteur d'une vanne à 3 voies

- fonctionnement manuel ou automatique

### Régulateur numérique de chauffage

- commandé par les conditions atmosphériques

### Températures ajustables

- température extérieure
- température du départ de la chaudière
- température d'entrée de circuit de chauffage
- température de l'eau sanitaire
- température du local (via thermostat)

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)



## Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 20.01.2026

Plages de mesure  
- température: -20...60°C  
230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids  
Lxlxh: 1400x700x1850mm  
Poids: env. 75kg

Liste de livraison  
1 banc dessai  
1 notice

Produits alternatifs  
HL105 - Panneau d'étude vanne à trois voies  
HL106 - Panneau d'étude vanne à quatre voies  
HL108 - Panneau d'étude circuit de chauffage domestique

GSDE s.a.r.l.

181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY  
Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>  
[www.gsde.fr](http://www.gsde.fr)